

Procédure de changement de serveur

1/Configuration recommandée

2/Localisation de la base de données CS trophy gestion

3/Localisation chemin des radios

4/Procédure d'installation sur nouveau serveur

Configuration recommandée


Composant	Recommandé	Minimum
Système d'exploitation	Windows10 Pro (64bits) Windows Server	Windows 8.1 (64bits) Windows 8 Pro (64bits)
Microprocesseur	Intel I5/I7 ou équivalent	Intel I3 ou équivalent
Mémoire	8Go ou plus	4 Go
Capacité disque dur	40 Go disponible	10 Go disponible
Résolution écran	1920 x 1080	1024 x 768
Carte graphique	2 GO ou plus (carte dédiée)	1 GO (carte dédiée)
Configuration réseau	Ethernet 1 Gbs	Ethernet 100 Mbs
Autres	Imprimante, Système de sauvegarde, Lecteur Sesam Vitale	

Note : Les configurations peuvent changer si un système d'imagerie numérique est installé sur votre ordinateur, RVG, Panoramique, Caméra,3D... (cf : manuel d'utilisation correspondant)


Migration des données :

Chemin de la base de données sur l'ancien serveur :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cet icone dans les icones de notifications de la barre des taches windows.

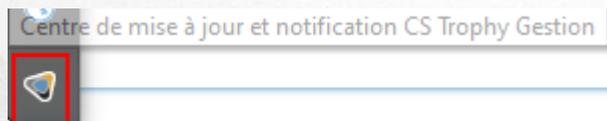

Puis cliquez sur diagnostic.

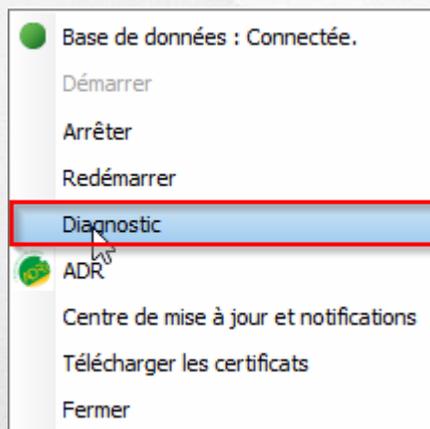

Copiez l'intégralité du dossier

Diagnostic : Service CS Trophy Gestion - Version 1.01.016

Localisation de la base de données
C:\Users\Public\Documents\Carestream\CS Data Trophy Gestion

Localisation de CS Trophy Gestion
C:\Program Files (x86)\Carestream\CS Trophy Gestion\
version 5.0.04.06

Serveur

Nom : [REDACTED]
Etat connexion : Connecté
Service MantaManager : Connecté
Service CS Trophy Gestion : Connecté
Port : 4902

Licences

Nombre de connexions accordées : 1
Nombre de connexions en cours d'utilisation : 0

Identification de l'ordinateur

Nom : [REDACTED]
Type d'installation : Serveur

Fermer

Puis le coller sur le nouveau poste serveur.

Pour info, le chemin par défaut est : C:\Users\Public\Documents\Carestream\CS Data Trophy Gestion\

Trouver le chemin des radios :

Dans CS Trophy Gestion, rendez-vous dans « paramétrages et outils » puis dans « radiologie ».

Paramétrages | Fichiers Patients | Fichiers de données | Sesam Vitale | Outils

Gestion des praticiens	Maquettes plan de traitement
Lettres-clés	Maquettes devis
Catégories pour postes	Maquettes factures prothèse
Catégories pour actes	Maquettes bons de prothèse
Agenda téléphonique	Maquettes ordonnances
Types de rendez-vous	Maquettes courriers patients
Types d'événements	Maquettes notes d'honoraires
Plages horaires réservées	Maquettes reçus d'honoraires
Jours fériés	Maquettes carnet de rdv
Arcade dentaire	Lettres de relance
Gestion des actes	Lettres de maintenance
Gestion des médicaments	Maquettes e-mails
Gestion des tiers payant	Interface comptabilité
Laboratoires	Radiologie
Paramétrages cabinet	Matériaux

fermer

Le chemin se trouve dans « chemin d'accès au dossier des images ».

Accès à l'imagerie

Logiciel d'imagerie Carestream | Autres

Logiciel d'imagerie actif : DIS

Toujours synchroniser le dossier patient avec l'imagerie

Chemin d'accès au logiciel d'imagerie dentaire
C:\Program Files (x86)\Carestream\CSImaging\TWEXE

**Chemin d'accès au dossier des images
C:\twi**

Facturation automatique de l'imagerie

Code acte Intra-Orale
Code acte Panoramique
Code acte Céphal.

Système d'imagerie par défaut

Paramètres appliqués en réseau


valider | annuler

Copier et coller ce dossier sur le nouveau poste serveur.

Installation de CS Trophy Gestion:

Après vous être assuré d'avoir copié correctement les fichiers, lancez l'installation de CS Trophy Gestion.

Pendant l'installation, sélectionnez « serveur ».

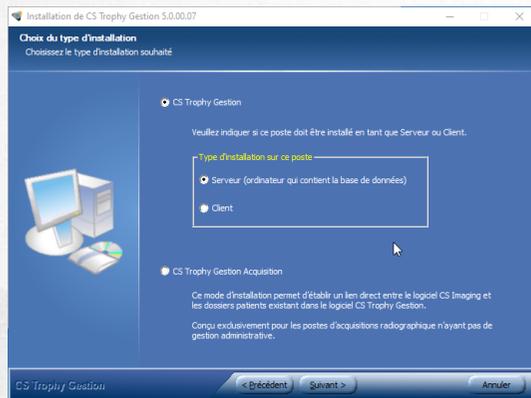

A la demande du dossier de la bases de données, indiquez le chemin du dossier de la base de données



Poursuivez l'installation.

A l'ouverture de CS Trophy Gestion, cliquez sur utilitaires, sélectionnez « changer utilisateur », choisir le profil « Administrateur », saisissez le mot de passe « z », allez ensuite dans « paramètres et outils » puis « paramètres cabinet »

Renseignez le nombre de connexions correspondant au contrat.

Licence Cabinet

Cabinet

Nom(s) praticien(s)

Adresse

CP/Ville

Téléphone

Fax

E-Mail

Distributeur

N° du produit BE_CSTO_50

Licence / nombre de connexions 0

Nombre de praticiens 0 Lien Imagerie

Comptabilité

Utiliser la compta intégrée Oui Non Année comptable 2020

Comptabilité différenciée Oui Non Comptabilité SCM Oui Non

N° d'agrément de l'appareil

Radio groupe

Panoramique

Téléradiographique

Seuil majoration tarifaire 13 Prise en charge BBO en mois 6

imprimer valider annuler

Puis validez et envoyez la demande de licence.

Saisie du code d'enregistrement

IMPORTANT

La procédure ci-après doit être respectée suivant votre cas pour finaliser l'enregistrement du logiciel.

Vous avez déjà enregistré votre licence auprès de TROPHY et le code d'enregistrement vous a été communiqué. Il vous suffit de saisir le code d'enregistrement ci-dessous puis de cliquer sur le bouton "valider".

Vous n'avez pas enregistré votre licence d'utilisation auprès de TROPHY. Deux possibilités s'offrent à vous pour enregistrer la licence Trophy Gestion :

- 1) Enregistrement votre Licence par INTERNET
Complétez les informations ci-dessous puis cliquez sur le bouton "envoyer"
- 2) Enregistrement par COURRIER
Complétez les informations ci-dessous puis cliquez sur le bouton "imprimer"

Vous recevrez le code d'enregistrement dans les plus brefs délais. Il est possible de s'enregistrer ultérieurement dans la limite de 30 jours (par le menu "Aide" puis "Enregistrer la Licence")

Votre code de référence

N° de licence	Code d'enregistrement transmis par TROPHY
BE_CSTO_50	

Nom du distributeur

imprimer envoyer valider fermer

